

プレキャストゲル 泳動槽パッケージキャンペーン


期間：2017年9月25日(月)～2017年12月22日(金)

ゲル(20枚)と泳動槽のセットが **ALL 50% OFF!!**

こんなお客様におすすめです

- バイオ・ラッドのプレキャストゲル TGXゲルを使いたい
- 泳動槽の購入、増設を検討している
- 多検体の泳動を一枚のゲルで行いたい
- ウェスタンデータを総タンパク質量で手軽に補正したい

選択フローチャート

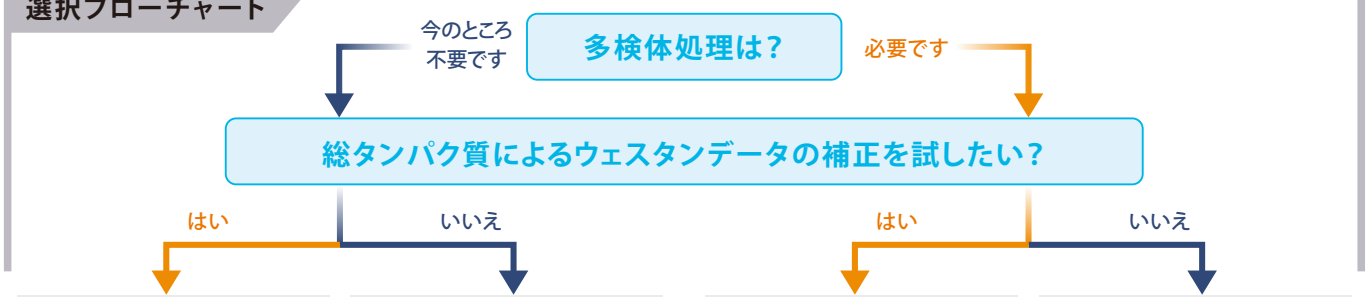

ミニプロティアン Tetraセルパッケージ

ミニプロティアンStain-Free
TGXゲル 20枚
+
Tetraレディーゲルセル



通常価格 ¥83,200

キャンペーン価格
¥41,600

ミニプロティアン
TGXゲル 20枚
+
Tetraレディーゲルセル



通常価格 ¥81,200

キャンペーン価格
¥40,600

Criterionセルパッケージ

Criterion Stain-Free
TGXゲル 20枚
+
Criterionセル



通常価格 ¥117,000

キャンペーン価格
¥58,500

Criterion
TGXゲル 20枚
+
Criterionセル



通常価格 ¥113,200

キャンペーン価格
¥56,600

BIO-RAD


ゲル性能・仕様

ゲルタイプ	総タンパク質補正	泳動時間(目安)	ウェル数*	保存温度
ミニプロティアンTGXゲル	-	30~35分(200V定電圧)	12ウェル(20 μ l), 15ウェル(15 μ l)	4 $^{\circ}$ C
ミニプロティアンStain-Free TGXゲル	対応	15~20分(300V定電圧)		
Criteiron TGXゲル	-	35~40分(200V定電圧)	18ウェル(30 μ l), 26ウェル(15 μ l)	4 $^{\circ}$ C
Criterion Stain-Free TGXゲル	対応			

総タンパク質量によるウェスタンデータの補正

ウェスタンブロットングデータの補正にはハウスキーピングタンパク質(HKP)が用いられますが、近年、安定性、定量性により優れた総タンパク質量による補正が推奨されており、使用論文数が増加しています。

Stain-Freeゲルは泳動後にUVを照射するだけで、タンパク質を可視化、定量できるため、さらに簡便に総タンパク質量によるウェスタンデータの補正を行えるようになります。

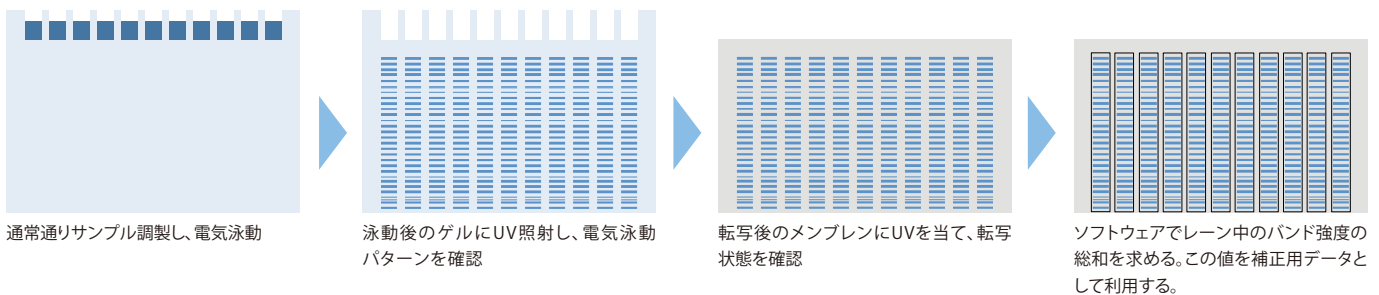

* Stain-Freeゲルではタンパク質中のトリプトファン残基が修飾され、蛍光で確認できるようになります。エビトープ部位、もしくは近傍にトリプトファンを含む場合、抗体抗原反応に影響が出る場合があります。

Ordering Information

ゲルタイプ	ウェル数	10%	12%	4-15%	4-20%	AnykD	キャンペーン価格	通常価格	
ミニゲル (ミニプロ ティアン)	TGXゲル	12ウェル	4561035C20	4561045C20	4561085C20	4561095C20	4569035C20	¥40,600	¥81,200
		15ウェル	4561036C20	4561046C20	4561086C20	4561096C20	4569036C20	¥40,600	¥81,200
	Stain-Free TGXゲル	12ウェル	4568035C20	4568045C20	4568085C20	4568095C20	4568125C20	¥41,600	¥83,200
		15ウェル	4568036C20	4568046C20	4568086C20	4568096C20	4568126C20	¥41,600	¥83,200
ワイドゲル (Criterion)	TGXゲル	18ウェル	5671034C20	5671044C20	5671084C20	5671094C20	5671124C20	¥56,600	¥113,200
		26ウェル	5671035C20	5671045C20	5671085C20	5671095C20	5671125C20	¥56,600	¥113,200
	Stain-Free TGXゲル	18ウェル	5678034C20	5678044C20	5678084C20	5678094C20	5678124C20	¥58,500	¥117,000
		26ウェル	5678035C20	5678045C20	5678085C20	5678095C20	5678125C20	¥58,500	¥117,000

構成品 ミニゲルセット:ミニプロティアンゲル(20枚)、ミニプロティアンTetraレディーゲルセル(2枚用)、オープニングレバー
ワイドゲルセット:Criterionゲル(20枚)、Criterionセル

* 本キャンペーンはゲル濃度、ウェル数限定となっていますが、その他の組み合わせについては弊社営業担当までご相談ください。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

ライフサイエンス www.bio-rad.com
 本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL:03-6361-7000
 大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 TEL:06-6308-6568
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL:092-475-4856
 ※学術のお問い合わせは TEL:03-6404-0331

※価格(税抜き)、仕様は2017年9月現在のものです、予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C11388L 1709a